

ZENICOR FLEX



ZENICOR FLEX

ZENICOR FLEX

Zenicor **FLEX**

Flexibel metod för
kontinuerligt EKG
– patch eller
standardelektroder

Zenicor
MEDICAL SYSTEMS

Vad är Zenicor Flex?

Flexibel metod för kontinuerligt EKG

Zenicor Flex är en flexibel lösning när kontinuerligt EKG krävs och ger komplett EKG-data med intelligent arytmidetektering. Zenicor Flex kan användas både som Event Recorder och Holter. Oavsett om patienten använder patch- eller standard-elektrod kan Zenicor Flex konfigureras till 1, 2 eller 3 kanaler samt olika samplingsfrekvenser. Endast en enhet behövs för olika monitoreringsbehov och konfigurationer.

ZENICOR FLEX

Remitterande klinik

- Initiera en registrering
- Ladda upp data för analys
- Ta emot och ladda ned rapport

Tolkningsklinik

- Redigera & analysera EKG-data
- Skapa rapport till remittent



Teknisk data

- Batteritid upp till 14 dygn* med snabb laddningstid på ca 1 timme för att förlänga utredningstid
- Minneskapacitet upptill 4 Gb*

*konfigurationsberoende, källa Bittum Biosignals Ltd.

Liten och bekväm


Zenikor Flex är mycket enkel att använda. Patienten kan obehindrat duscha, utföra dagliga sysslor eller sport. Den är vattentät, lätt och smidig vilket gör den bekväm att bära samtidigt som den ger högkvalitativa och tillförlitliga EKG-registreringar.

Smarta funktioner för en smidig utredning

- Data från Zenicor Flex hanteras enkelt i Zenicor View där funktioner för en smidig tolkning av EKG erbjuds. Analys av EKG kan ske på distans vilket möjliggör start av utredningen på valfri mottagning eller vårdcentral med möjlighet till tolknings-tjänst på distans eller att kopplas till lokal specialist. Allt i samma system.
- Zenicor Flex möjliggör pacemakerdetektering och analys, automatisk start vid hudkontakt samt automatisk avstängning efter önskat behov.
- Med P-vågcentrerad teknik fokuserad på högkvalitativ EKG-signal fångas och analyseras arytmier enkelt.



ZENICOR FLEX

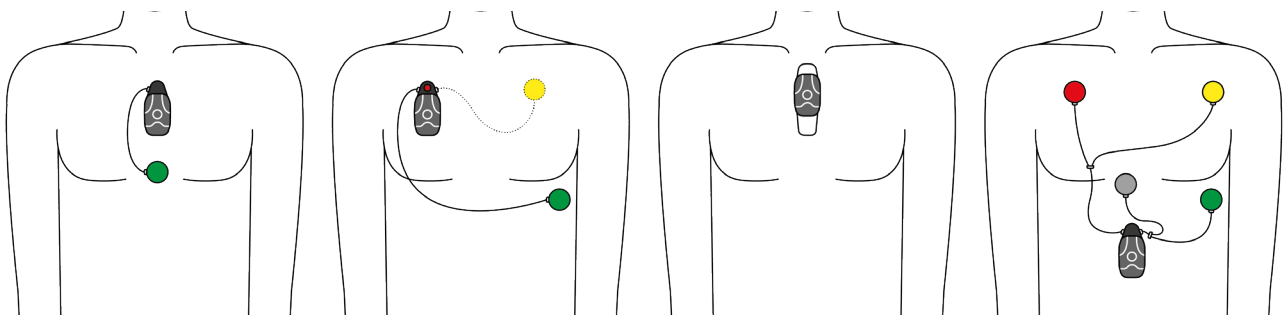

1 kanal - 2 elektroder

1-2 kanaler - 2/3 elektroder

Patch 1-3 kanaler

3 kanaler - 5 elektroder

Flera placeringsalternativ

Zenicor Flex kan placeras på flera olika sätt, mät EKG diskret under kläder med antingen standardelektroder eller med patch-elektrodena OmegaSnap™ och MiniSnap™.

- Samplingsfrekvenser 125, 250, 500 & 1000 Hz
- Vattentät, IP67
- Pacemaker-, QT- och HRV-analys
- CE-klass IIa

Zenitor Flex, en del av The Zenitor Solution



Zenitor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
www.zenitor.se
info@zenitor.se

MM-229SE_rev01

Zenitor
MEDICAL SYSTEMS